



AUFLADEN

- 1) Schließen Sie das mitgelieferte USB-DC-Kabel an den Ladeanschluss des Geräts an.
- 2) Die Ladegeschwindigkeit hängt vom verwendeten Adapter ab. Es wird empfohlen, einen USB-Adapter zu verwenden, der 5 V/2 A unterstützt, um den Akku in etwa 3 Stunden vollständig aufzuladen.
- 3) Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige langsam. Wenn die Betriebsanzeige nicht mehr blinkt, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

BETRIEB

- Drücken Sie einmal den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Auto-Modus-Taste, um zwischen zwei Auto-Modi zu wechseln: M1 (Traktion + Vibration + rotes/blaues Licht), M2 (Traktion + Schaukel + rotes/blaues Licht).
- Drücken Sie wiederholt die Heiztaste, um die Heizintensität während des Betriebs anzupassen (niedrig / mittel / hoch).
- Halten Sie die +/-Taste gedrückt, um die Traktionsstufe während des Betriebs anzupassen. Lassen Sie die +/- Taste los, sobald die angenehme Höhe erreicht ist.
- Drücken Sie die Vibrationstaste, um die Vibrationsmassage während des Betriebs ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste für rotes/blaues Licht, um das rote/blaue Licht während des Betriebs ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie die Schwenktaste, um die Links- und Rechtsstreckung während des Betriebs ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie die EMS-Taste, um Niederfrequenz-EMS einzuschalten. Drücken Sie die EMS-Taste wiederholt, um die EMS-Stufe zu erhöhen (Stufe 1 – Stufe 10). Drücken Sie die EMS-Taste erneut 2 Sekunden lang, um das Niederfrequenz-EMS auszuschalten.
- Drücken Sie einmal den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.
- Wenn das Gerät nach einer 10-minütigen Sitzung den Betrieb einstellt, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um eine neue Sitzung zu starten.
- Wenn der Akkuladestand weniger als 10 % beträgt, blinkt die Betriebsanzeige. Bitte laden Sie den Akku auf. Der Betrieb konnte während des Ladevorgangs fortgesetzt werden.

WARTUNG, REINIGUNG & LAGERUNG

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein leicht feuchtes Handtuch und zum Trocknen ein weiches Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder Alkohol.
- Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich das von ELEEEELS mitgelieferte USB-DC-Kabel.



R4-IM-02

WARNUNGEN UND VORSICHT

- Nicht in Wasser tauchen. Von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fernhalten. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Nicht länger als eine Stunde ununterbrochen betreiben. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten ruhen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Nur für den Gebrauch durch Erwachsene. Bei Verletzungen nicht verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLAG, BRAND UND VERLETZUNGEN ZU REDUZIEREN, MUSS DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWENDET WERDEN:

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Manipulieren oder verändern Sie das Gerät in keiner Weise.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte verwenden Sie den ELEEEELS R4 oder ein anderes Massagegerät nicht ohne vorherige Zustimmung Ihres Arztes, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden: Schwangerschaft, Neuropathie, Netzhautschädigung, Trägerin eines Herzschrittmachers, kürzliche Operation, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, neuer Gelenkersatz, chirurgische Stifte oder Platten, oder Sie haben Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit.

GARANTIE

FALLS DIESES PRODUKT INNERHALB EINES JAHRES AB KAUFDATUM AUFGRUND EINES MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERS AUSFÄLLT, REPARIERT ODER ERSETZT ELEEEELS DAS PRODUKT; ODER AUSGEFALLENE KOMPONENTEN, KOSTENLOS. DIESEGARANTIE SCHLIESST AUS:

- (a) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder falsche Handhabung während des Transports verursacht wurden;
- (b) Schäden, die durch die Verwendung von Geräten aufgrund unbefugter Reparatur entstehen;
- (c) Fehlfunktion von Einheiten, die nicht gemäß den Anweisungen von ELEEEELS verwendet werden;
- (d) Schäden, bei denen die Reparaturkosten die Kosten des Produkts übersteigen;
- (e) Verschlechterung des gelieferten Produkts aufgrund unsachgemäßer Lagerung und/oder Sicherstellung der Bedingungen auf dem Gelände des Kunden und
- (f) Jedes Produkt, für das kein datierter Kaufbeleg vorgelegt werden kann.

R4 | Multi-Winkel
Lendenwirbel
Traktionsgerät

Bedienungsanleitung



Dynamisches Dehnen



Vibrations massage



Heiße Kompress



Rot-/Blau licht therapie




Nieder frequenz EMS Massage



2 Stunden Akkulaufzeit



R4 auf einen Blick

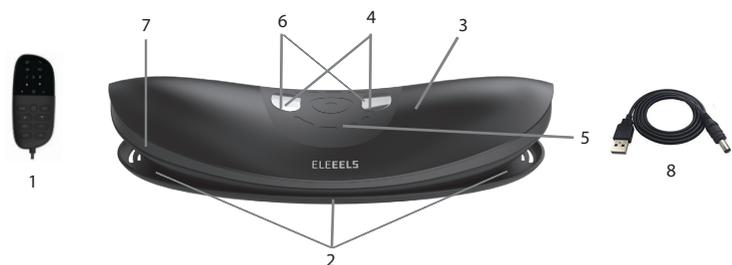

- 1) Benutzerfreundlicher Controller
- 2) Dynamisches Dehnen
- 3) Multifrequenz Vibrations massage
- 4) Heiße Komresse
- 5) Rot-/Blau licht therapie
- 6) Nieder frequenz EMS Massage
- 7) Ladeanschluss
- 8) USB-DC-Kabel

Spezifikationen


- Nennspannung: 7,4 V
- Eingang: DC 5V/2A
- Batteriekapazität: 1500 mAh
- Nennleistung: 10 W
- Gewicht: 1700 Gramm
- Traktionsgrad: 0 - 50 mm
- Betriebsdauer: bis zu 1-1,5 Stunden Nutzung pro Ladung




Vorbereitung




1. Die Grundplatte muss unter dem Gerät platziert werden
2. Die Platte soll das Gesamterlebnis bei der Verwendung des Zugeräts auf einer weichen Oberfläche verbessern
3. Sie können das Zugerät mit oder ohne Platte betreiben, wenn das Gerät auf einer harten Oberfläche steht
4. Betreten Sie die Platte nicht und verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke

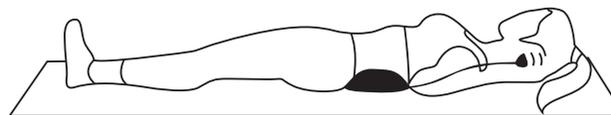


Stellen Sie das Gerät auf eine flache Unterlage und legen Sie sich langsam unter Ihrer Taille zwischen L1 und L5 darauf. Drücken Sie die Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.

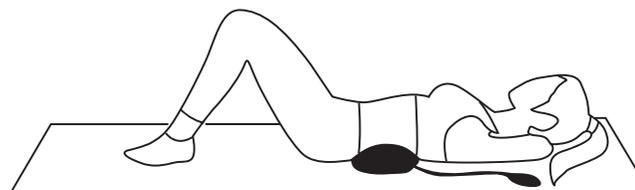


Halten Sie die +/- Taste gedrückt, um die Traktionsstufe während des Betriebs anzupassen.

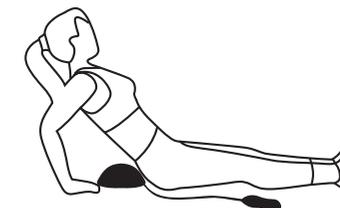

Sobald Sie mit dem Traktionsabschnitt fertig sind, drücken Sie die Taste, um das Traktionsniveau wieder auf das ursprüngliche Niveau einzustellen. Legen Sie sich weiterhin 3 Minuten lang auf das Gerät, bevor Sie langsam aufstehen.

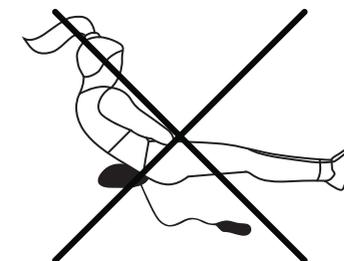

Stehen Sie nicht auf, bis die Traktion wieder das ursprüngliche Niveau erreicht hat.

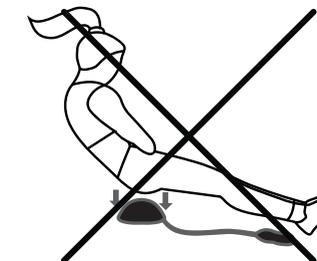

Es ist verboten, während des Betriebs direkt auf dem Gerät zu sitzen.

